

nosiboo[®]pro2
electric nasal aspirator





nosiboo^{*}pro2
electric nasal aspirator

Before using the Nosiboo Pro2, carefully read this guide and the User Manual as well! Please keep this guide for future reference.

Fantastic Two & Nosiboo





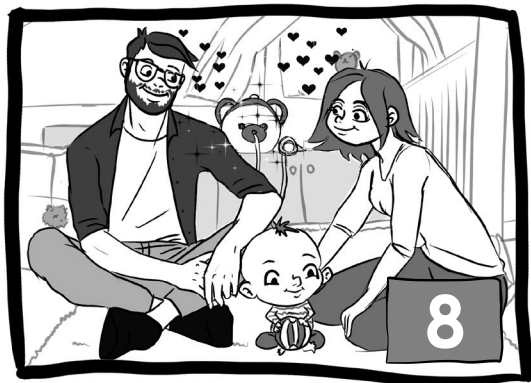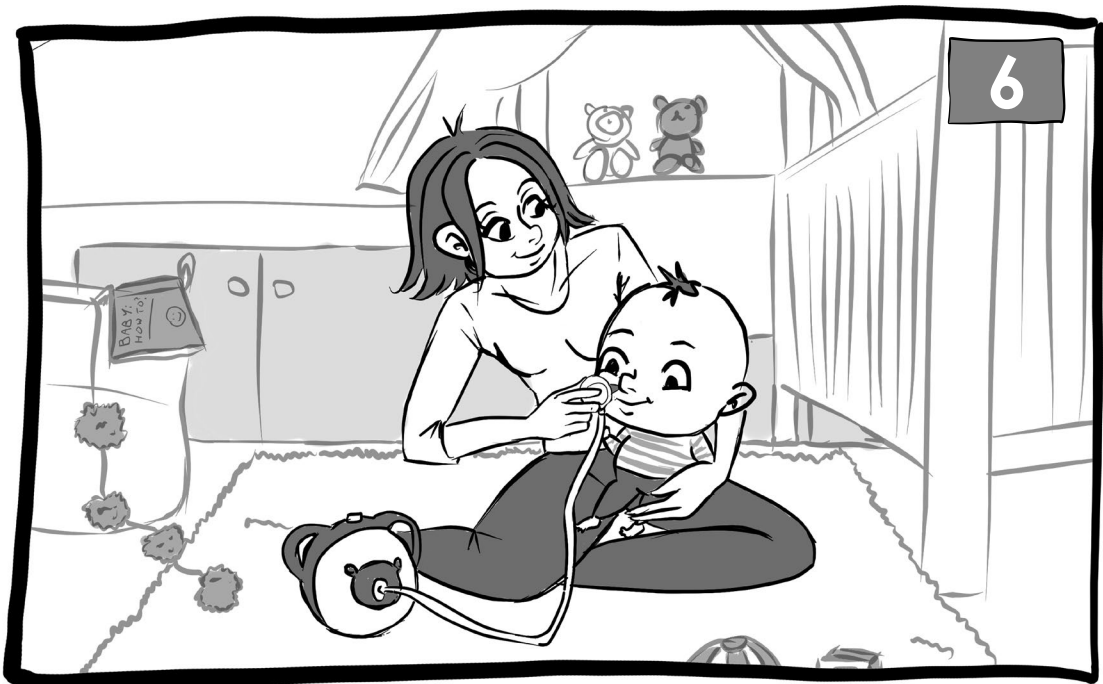

to be continued...

IN THE BOX



Quick Start Guide



Safety instructions



Nosiboo Pro2



Connecting Tube



Colibri head
+ spare nose
tip



Power cord

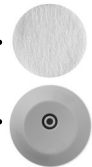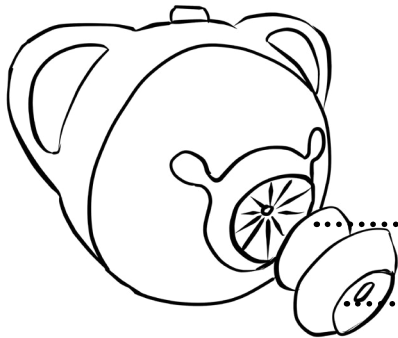

Air mesh

Connecting unit

assembled

Cleaning
brush




Contact the distributor if any part is missing from the package.

USING THE NOSIBOO PRO2

1. Before the first use


First disassemble the Colibri head and clean* and dry its parts.

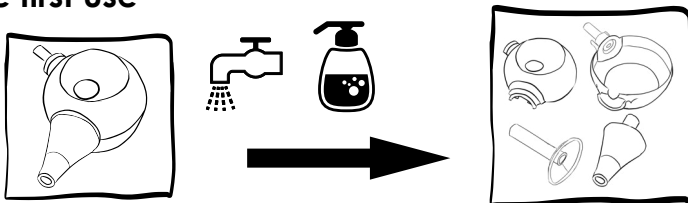


The device can be used for removing the nasal mucus from a child's nose. It cannot be used for any other purpose.

* Check the "CLEANING" section below for more details about the proper cleaning method.

2. Assemble the Colibri head

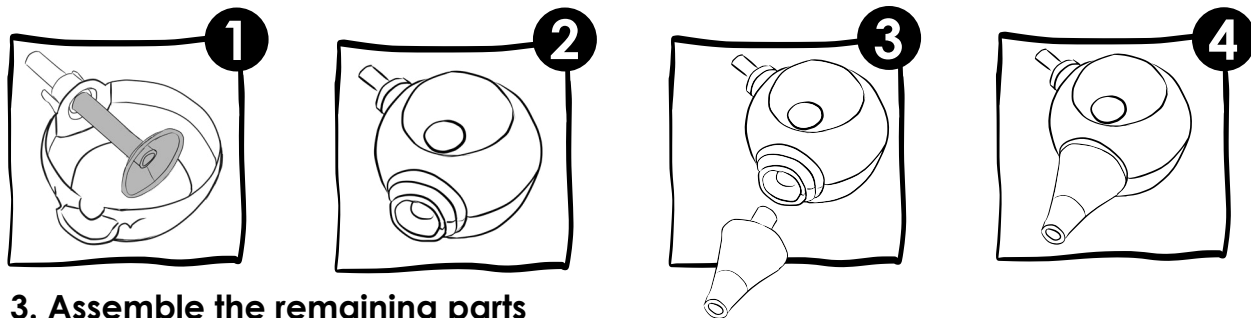

3. Assemble the remaining parts


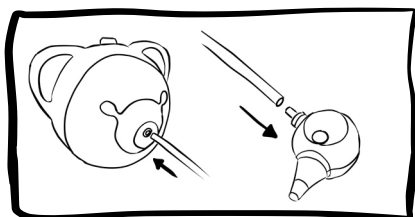


a) Attach the connecting tube to the device and to the Colibri head.

Do not aspirate water with the device!



Do not use the nasal aspirator for nasal washing!

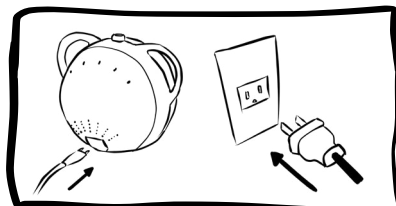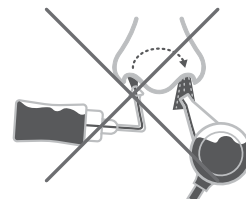

b) Attach the power cord to the device and the power outlet. **The device is ready to use.**

Do not disconnect the device from the power network during operation! The device should be connected to or disconnected from the power network only if the control button is in OFF position (the device is switched off).

INSTRUCTIONS FOR USE & SETTINGS

1



Switch on the device by turning the control button.



The effective and strong (max) suction power has been proven safe for nasal aspiration by ENT doctors.



If the mucus is thin, you can use the device at a lower setting. If it is thick, you can use the device at a higher setting than normal.

2

Select the correct suction power.
Setting recommendations:

- * min setting for newborns
- * middle setting for babies
- * max setting for small children and for pre-schoolers



3

Hold your child in a stable position.

- * Aspirate the nose of infants after laying them into a stable position and hold their head during the process.
- * You may also sit them in an infant bouncer or infant seat.
- * If the child is already able to sit, sit them in your lap. In this case, do not lay the child on their back during the aspiration.



4


Gently insert the clean, dry nose tip into the child's nostril.

- * Move the nose tip around gently to make sure that you get all areas of the nostril.
- * In rare instances, it is possible that the nostrils of a newborn are too small for inserting the nose tip. In this case, place the nose tip in a way that the nostril is completely covered. The nasal aspirator's efficiency is enough for cleaning the nasal passages properly.




5

Switch off the device after use with the control button (OFF setting). The device should be connected to or disconnected from the power network only if the control button is in OFF position (the device is switched off).

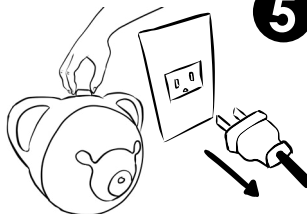

If you do not use the device for a longer period of time, disconnect it from the power network.


CLEANING

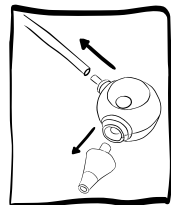

* Remove the connecting tube and the nose tip, then take apart the Colibri head.



* Wash the parts with liquid soap and lukewarm water.

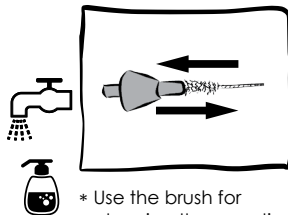

* Use the brush for cleaning the nose tip.




Do not disconnect the device from the power network during operation!


* You can soak the parts in a disinfection liquid just make sure the liquid is safe to use for baby equipment.



* Let the parts dry completely before the next use.

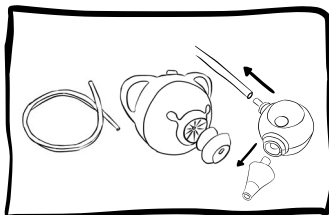


* It is not allowed to use boiling water, microwave oven, vaporizer, or baby bottle sterilizer for cleaning the spare parts because they might deform by heat!

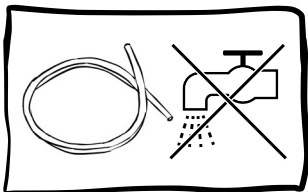

* Don't wash the connecting tube. Next to proper use, the mucus can't enter the tube so washing the tube is not necessary.

* However, if there is any mucus or liquid in the tube, then stop using the device. Clean the tube under running water and hang it to let it dry completely.

* Check whether the Colibri head is correctly assembled, and the collared tube has not been missed.

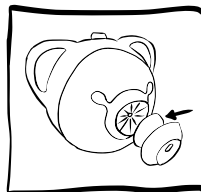


* After use, check the condition of the air mesh. (The air mesh is placed under the connecting unit.)

* The air mesh is there to prevent solid objects and dust from entering the housing.

* The air mesh is not there to absorb any mucus or liquid.

* If the air mesh is dirty or clogged, replace it.

* The air mesh can be used for a very long time next to the proper usage of the device.

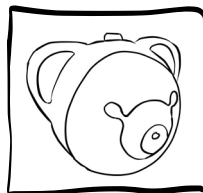


* Clean the housing with a dry, soft cloth.


* Do not use any liquids, detergents, or chemicals for cleaning the housing.

* Keep the device in a space where it is protected from dust, direct sunlight, and heat.

HINTS & TIPS

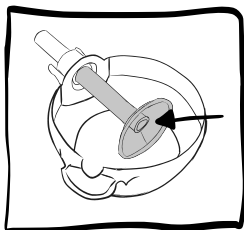

* It is forbidden to use the Colibri head and the device without the collared tube.

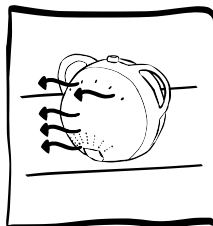

* While in use, the device should be in a stable position, standing on a flat surface.

* Do not cover the vents on the back of the device while in use. Hot air exits the device through the vents.

* Make sure the heat exits in a different direction than where your child is.



* The device should only be used by adults.

* Do not allow children to play with the device. It is NOT A TOY.



* Dry, very thick mucus can be dissolved by a mild saline solution. After using it, wait a few minutes, wipe excess discharge with a tissue, then reuse the nasal aspirator as directed.

* Do not use more than 5 ml of saline solution at once.



User manual



AFTER-SALE SERVICE

For more information about usage, cleaning, and for troubleshooting, see the User Manual.

www.nosiboo.eu
customerservice@nosiboo.com
+36 72 551 642

nosiboo^{*}®
designed to care



nosiboo^{*}pro2
electric nasal aspirator

Avant d'utiliser Nosiboo Pro2, veuillez lire attentivement ce guide ainsi que le manuel de l'utilisateur ! Conservez ce guide pour le consulter ultérieurement.

Fantastic Two & Nosiboo





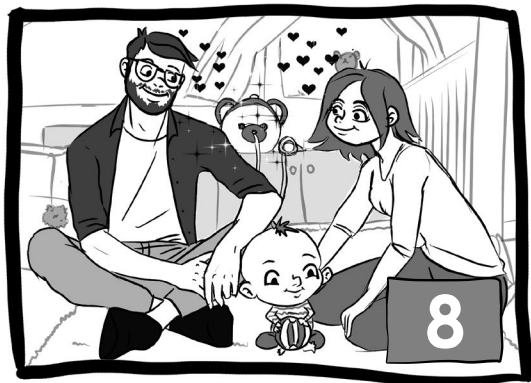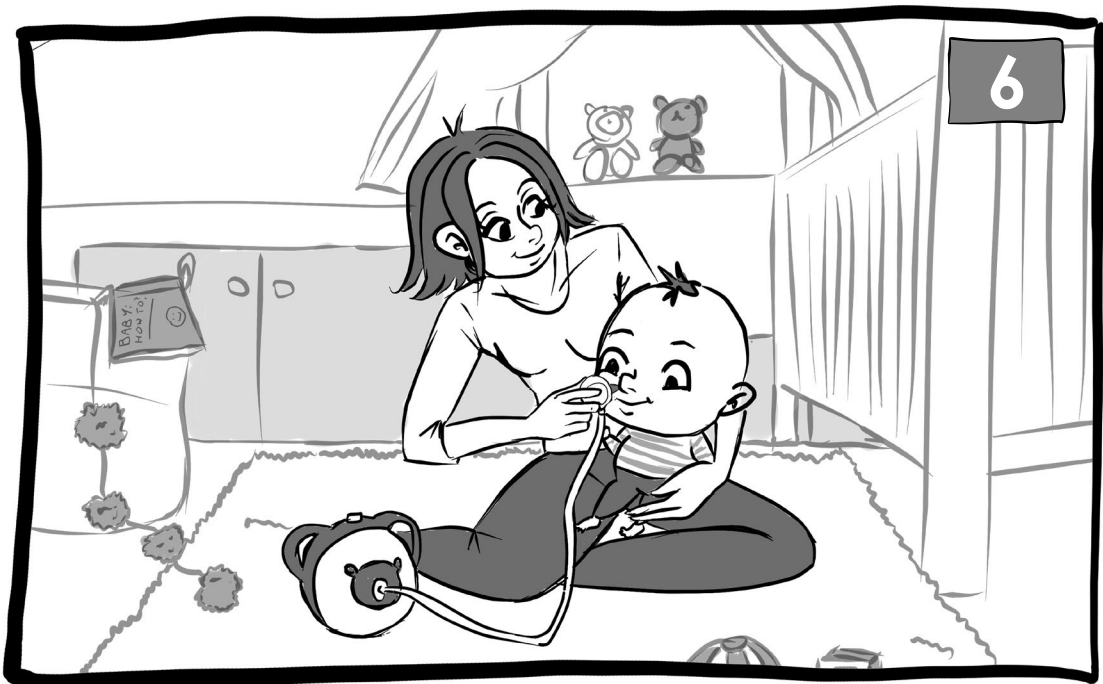

to be continued...

CONTENU DE LA BOÎTE



Guide de démarrage rapide



Consignes de sécurité



Nosiboo Pro2


Tube d'aspiration



Tête Colibri + Embout nasal de rechange



Cordon d'alimentation

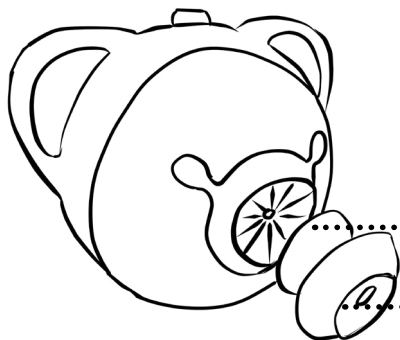

Maillage d'air



Pièce de connexion

assemblée

Veillez contacter le distributeur s'il manque des pièces.


Brosse



UTILISATION DU NOSIBOO PRO2

1. Avant la première utilisation





Tout d'abord, démontez la tête Colibri, puis nettoyez* et séchez ses pièces.

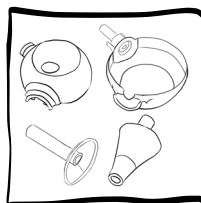


Le dispositif peut être utilisé pour retirer le mucus nasal du nez d'un enfant. Il ne doit être utilisé à aucune autre fin.

* Consultez la section « NETTOYAGE » ci-dessous pour plus de détails sur la méthode de nettoyage appropriée.


2. Assemblez la tête Colibri

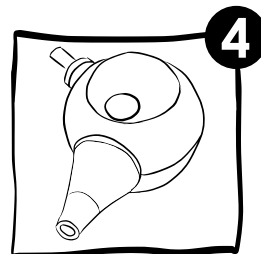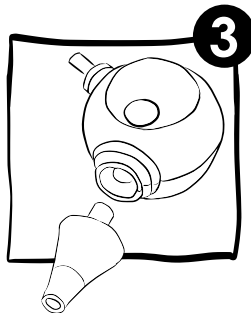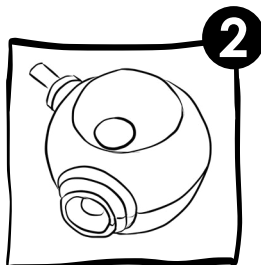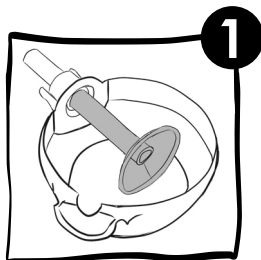

3. Assemblez les pièces restantes

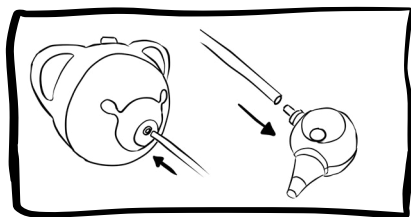

a) Connectez le tube d'aspiration au dispositif et à la tête Colibri.

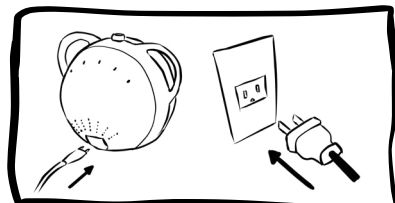


b) Branchez le cordon d'alimentation sur le dispositif et la prise d'alimentation. **Le dispositif est prêt à l'emploi.**

Ne déconnectez pas l'appareil du réseau électrique lorsqu'il est en fonctionnement ! L'appareil ne peut être branché ou débranché du réseau électrique que lorsque le bouton de commande est en position OFF (l'appareil est éteint).


Ne pas aspirer d'eau avec l'appareil !



Ne pas utiliser le mouchebébé pour un lavage nasal !

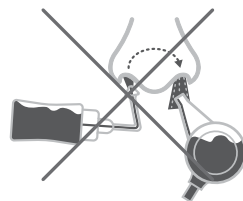

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET RÉGLAGES

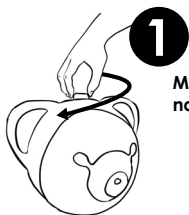

1 Mettez l'appareil en marche en tournant le bouton de commande.



La puissance d'aspiration efficace et forte (max) s'avère sûre pour l'aspiration nasale par des ORL.




Si le mucus est peu épais, le dispositif peut être utilisé à un réglage plus bas. S'il est plus épais, le dispositif peut être utilisé à un réglage plus élevé que le normal.



2 Sélectionnez la puissance d'aspiration appropriée.

Recommandations de réglage :

- * réglage minimal pour les nouveau-nés
- * réglage moyen pour les bébés
- * réglage maximal pour les jeunes enfants

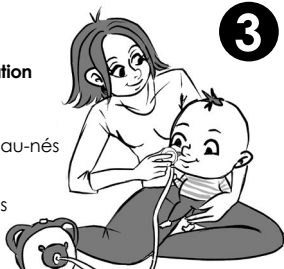


3 Maintenez votre enfant dans une position stable.

- * Allongez le bébé dans une position stable avant de procéder à l'aspiration, et tenez bien sa tête pendant le processus.
- * Vous pouvez également l'asseoir dans un transat ou un siège pour bébé.
- * Si l'enfant est déjà capable de se tenir assis, asseyez-le sur vos genoux. Dans ce cas, n'allongez pas l'enfant sur le dos pendant l'aspiration.



4 Insérez doucement l'embout nasal propre et sec dans la narine de l'enfant.


- * Bougez l'embout nasal dans la narine en douceur pour atteindre toutes les zones.
- * Il peut arriver que les narines d'un nouveau-né soient encore trop petites pour y insérer l'embout nasal. Dans ce cas, posez la pointe de l'embout au nez de façon qu'elle couvre complètement l'entrée de la narine. La puissance d'aspiration du mouche-bébé est suffisante pour nettoyer correctement les voies nasales.

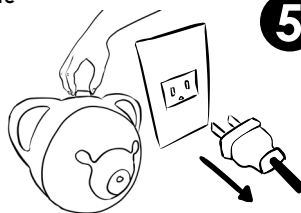

5 Éteignez le dispositif après l'utilisation avec le bouton de commande (position OFF). L'appareil ne peut être branché ou débranché du réseau électrique que lorsque le bouton de commande est en position OFF (l'appareil est éteint).

Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le du réseau électrique.


NETTOYAGE

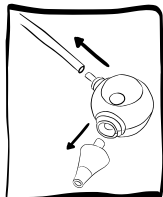

* Retirez le tube d'aspiration et l'embout nasal, puis démontez le boîtier Colibri.



* Lavez les pièces avec du savon liquide et de l'eau tiède.

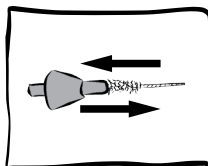

* Utilisez la brosse pour nettoyer l'embout nasal.




* Il est possible de faire tremper les pièces dans un liquide désinfectant. Vérifiez simplement si le liquide peut être utilisé avec un équipement de puériculture.


Ne déconnectez pas l'appareil du réseau électrique lorsqu'il est en fonctionnement !



* Laissez les pièces sécher complètement avant la prochaine utilisation.

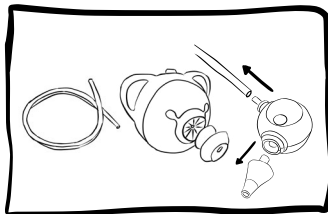


* Il est interdit d'utiliser de l'eau bouillante, un four à micro-ondes, un vaporisateur ou un stérilisateur de biberons pour nettoyer les pièces détachées, car elles pourraient être déformées par la chaleur.

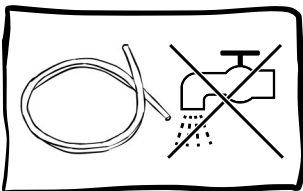

* Ne lavez pas le tube d'aspiration. Lors d'une utilisation correcte, le mucus ne peut pas rentrer dans le tube, donc son nettoyage n'est pas nécessaire.

* Toutefois, si vous constatez la présence de mucus ou de liquide à l'intérieur du tube, cessez d'utiliser le dispositif. Nettoyez le tube et laissez-le sécher complètement. Vous pouvez le rincer sous l'eau courante et le suspendre.

* Vérifiez si la tête Colibri est correctement assemblée, et si le tube à collet ne manque pas.

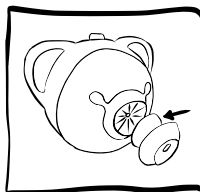


* Après utilisation, vérifiez l'état du maillage d'air. (Le maillage d'air est placé sous la pièce de connexion.)

* Le maillage d'air est destiné à empêcher la pénétration des corps solides et de la poussière dans le boîtier.

* Le maillage d'air n'est pas prévu pour l'absorption de mucus ou de liquide.

* Si le maillage d'air est sale ou encrassé, remplacez-le.

* Le maillage d'air peut fonctionner pendant très longtemps si le dispositif est utilisé correctement.

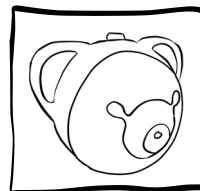


* Nettoyez le boîtier avec un chiffon doux sec.

* N'utilisez pas de liquide, de détergent ou de produit chimique pour nettoyer le boîtier de l'appareil.

* Gardez le dispositif à l'abri de la poussière, de la lumière du soleil et de la chaleur.

ASTUCES ET CONSEILS

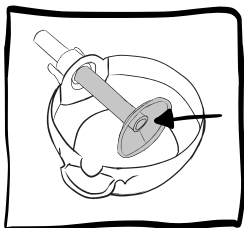

* N'utilisez pas la tête Colibri et le dispositif sans le tube avec collet.



* Pendant son utilisation, le dispositif doit être dans une position stable, sur une surface plane.

* Ne recouvrez pas les ouvertures d'aération à l'arrière du dispositif pendant son utilisation. De l'air chaud sort du dispositif par les ouvertures d'aération.

* Assurez-vous que la chaleur n'est pas dirigée vers votre enfant.



* Le dispositif ne doit être utilisé que par des adultes.

* Ne laissez pas les enfants jouer avec le dispositif, ce n'est PAS UN JOUET.




* Le mucus très épais et sec peut être dissous par une solution légèrement saline. Après son utilisation, attendez quelques minutes, essuyez l'excès avec un mouchoir, puis réutilisez le mouche-bébé tel qu'indiqué.

* N'utilisez pas plus de 5 ml de solution saline à la fois.



Manuel d'utilisation

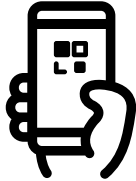

SERVICE APRES-VENTE

Pour plus d'informations sur l'utilisation, le nettoyage et en cas de problèmes, consultez le manuel d'utilisation.

www.nosiboo.eu
customerservice@nosiboo.com
+36 72 551 642

nosiboo^{*}®
designed to care


IT



nosiboo^{*}pro2
electric nasal aspirator

Prima di utilizzare il Nosiboo Pro2,
leggere attentamente questa
guida e il manuale d'istruzioni!
Si prega di conservare questa
guida per futuro riferimento.

Fantastic Two & Nosiboo




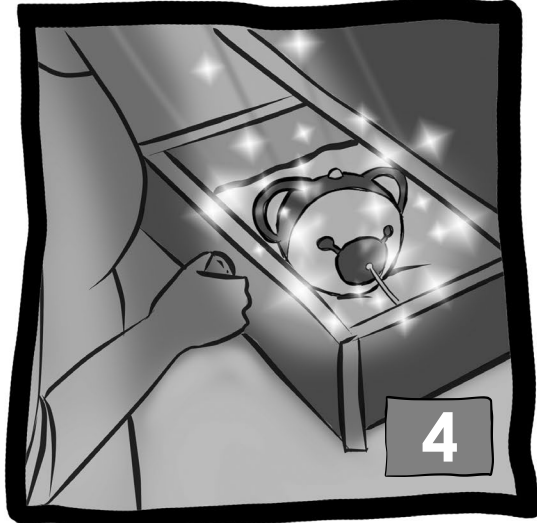

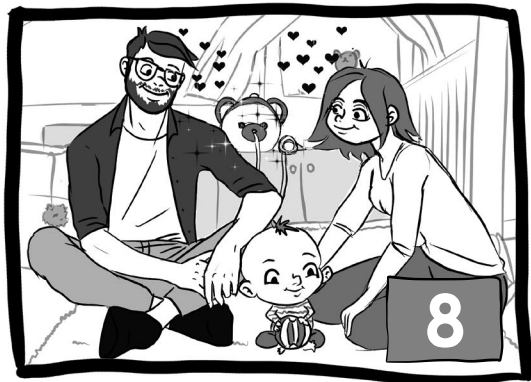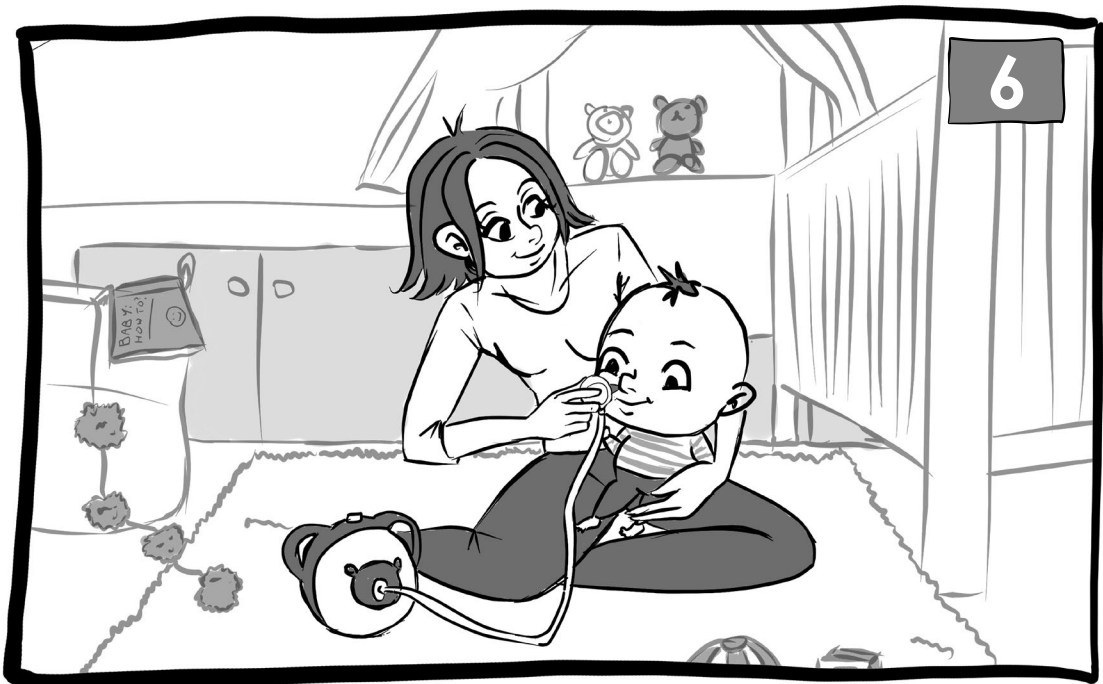

to be continued...

CONTENUTO DELLA SCATOLA

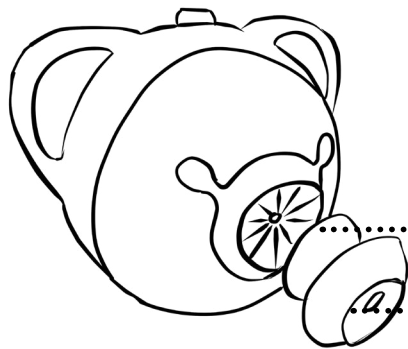

Guida rapida



Istruzioni di sicurezza




Nosiboo Pro2

Tubo flessibile



Testa Colibri
+ beccuccio

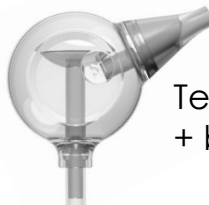

Cavo di
alimentazione



Filtro



Unità di raccordo

assemblato

Contattare il distributore in caso di parti mancanti.


Spazzola



L'UTILIZZO DI NOSIBOO PRO2

1. Prima del primo utilizzo



Per prima cosa smontare la testa Colibri, e pulire* e asciugare le sue parti.

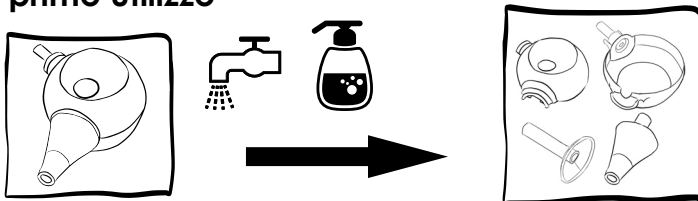


Il dispositivo può essere utilizzato per rimuovere il muco nasale dal naso di un bambino. Non può essere utilizzato per altri scopi.

* Consultare la sezione "PULIZIA" di seguito per maggiori dettagli sul metodo di pulizia corretto.


2. Montare la testa Colibri

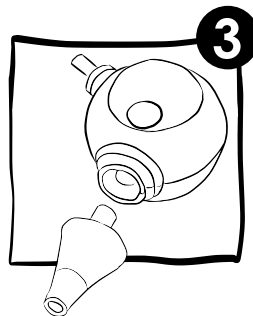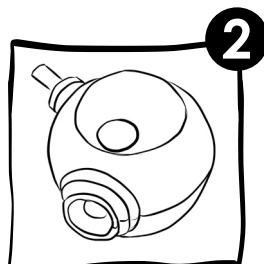

3. Montare le parti rimanenti

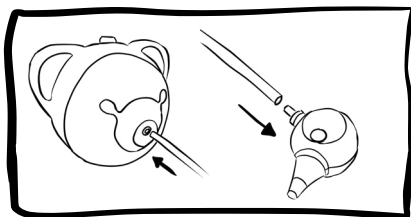

a) Collegare il tubo flessibile al dispositivo e alla testa Colibri.

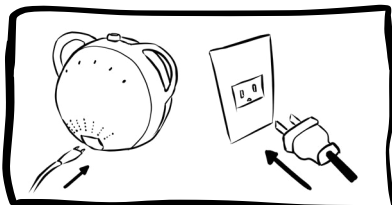


b) Collegare il cavo di alimentazione al dispositivo e alla presa di corrente.
Il dispositivo è pronto all'uso.

Non scollegare il dispositivo dalla rete elettrica durante il funzionamento! Il dispositivo deve essere collegato alla e scollegato dalla presa di corrente soltanto quando il pulsante di controllo è in posizione OFF (il dispositivo è spento).

Non aspirare acqua con il dispositivo!



Non utilizzare l'aspiratore nasale per il lavaggio del naso!

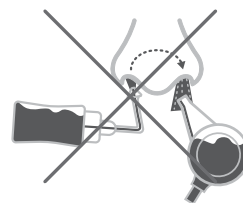

ISTRUZIONI PER L'USO E IMPOSTAZIONI

1



Accendere il dispositivo ruotando il pulsante di controllo.



La potenza di aspirazione efficace e forte (max) è stata dimostrata sicura per l'aspirazione nasale dai medici ORL.



Se il muco è fluido, è possibile utilizzare il dispositivo ad un'impostazione inferiore. Se è denso, è possibile utilizzare il dispositivo ad un'impostazione maggiore.

2



Selezionare la corretta potenza di aspirazione.

Raccomandazioni di impostazione:

- * impostazione minima per i neonati;
- * impostazione media per bambini piccoli;
- * impostazione massima per bambini più grandi e in età prescolare

3



Tenere il bambino in una posizione stabile.

- * Aspirare il naso dei neonati dopo averli messi in una posizione stabile e tenere la loro testa durante il processo.
- * Potete anche farli sedere in una sdraietta o in un seggiolino per bambini.
- * Se il bambino è già in grado di sedersi, prendetelo in braccio. In questo caso, non adagiare il bambino sulla schiena durante l'aspirazione.


4



Inserire gentilmente il beccuccio pulito e asciutto nella narice del bambino.

- * Spostare delicatamente il beccuccio per assicurarsi di arrivare in tutte le aree della narice.
- * In rare occasioni, le narici di neonati possono essere troppo piccole per inserire il beccuccio. In questo caso, tenere il beccuccio in un modo che la narice è completamente coperta. La potenza dell'aspiratore nasale è abbastanza per pulire i passaggi nasali efficacemente.

5

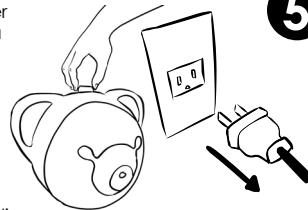


Spegnere il dispositivo dopo l'uso con il pulsante di controllo (posizione OFF). Il dispositivo deve essere collegato alla e scollegato dalla presa di corrente soltanto quando il pulsante di controllo è in posizione OFF (il dispositivo è spento).

Quando il dispositivo non è utilizzato per un periodo più lungo, scollegarlo dalla rete elettrica.

Non scollegare il dispositivo dalla rete elettrica durante il funzionamento!


PULIZIA

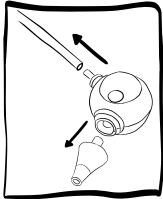

* Rimuovere il tubo flessibile e il beccuccio, poi smontare la testa Colibri.



* Lavare le parti con sapone liquido e acqua tiepida.

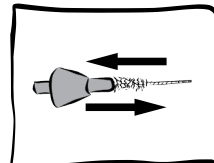


Usare la spazzola per pulire il beccuccio.




* È possibile immergere le parti in un liquido disinfettante ma assicurarsi che il liquido sia sicuro da usare per le attrezzature per bambini.



* Lasciare asciugare completamente le parti prima dell'uso successivo.

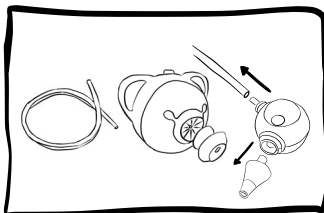


* Non bollire, non sterilizzare nel forno a microonde, non utilizzare un vaporizzatore o sterilizzatore per biberon, perché le parti potrebbero deformarsi con il calore!

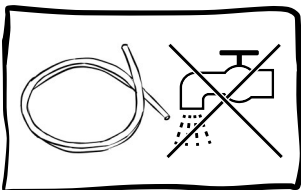

* Non lavare il tubo flessibile. Se il dispositivo viene utilizzato correttamente, il muco non può entrare nel tubo, quindi non è necessario lavarlo.

* Tuttavia, se nel tubo si trova del muco o del liquido, interrompere l'uso del dispositivo. Pulire il tubo sotto acqua corrente e lasciarlo asciugare completamente.

* Controllare se la testa Colibri è assemblata correttamente e il tubo con colletto non manca dalla testa.

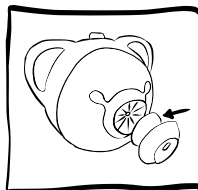


* Dopo l'uso, controllare le condizioni del filtro. (Il filtro è posizionato sotto l'unità di raccordo.)

* Il filtro serve ad evitare che oggetti solidi e polvere entrino nell'alloggiamento.

* Il filtro non serve ad assorbire muco o liquido.

* Se il filtro è sporco o intasato, bisogna sostituirlo.

* Il filtro può funzionare bene per molto tempo se il dispositivo viene utilizzato correttamente.

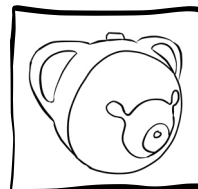


* Pulire l'alloggiamento con un panno morbido e asciutto.


* Non utilizzare liquidi, detergenti o prodotti chimici per la pulizia dell'alloggiamento.

* Conservare il dispositivo in uno spazio protetto da polvere, luce solare diretta e calore.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

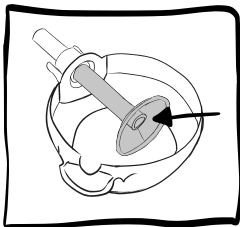

* È vietato utilizzare la testa Colibri e il dispositivo senza il tubo con colletto.

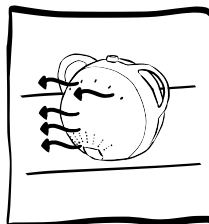

* Durante l'uso, il dispositivo deve essere in posizione stabile, verticale su una superficie piana.

* Non coprire le bocchette di ventilazione sul retro del dispositivo durante l'uso. L'aria calda esce dall'apparecchio attraverso le bocchette di ventilazione.

* Assicuratevi che il calore esca in una direzione diversa da quella in cui si trova il vostro bambino.



* Il dispositivo deve essere utilizzato solo da adulti.

* Non permettere ai bambini di giocare con il dispositivo. Non è un GIOCATTOLO.




* Il muco secco e molto denso può essere sciolto da una soluzione salina leggera. Dopo l'uso, attendere alcuni minuti, pulire le fuoriuscite in eccesso con un fazzoletto di carta, quindi riutilizzare l'aspiratore nasale come indicato.

* Non utilizzare più di 5 ml di soluzione salina in una volta sola.



Manuale d'istruzioni

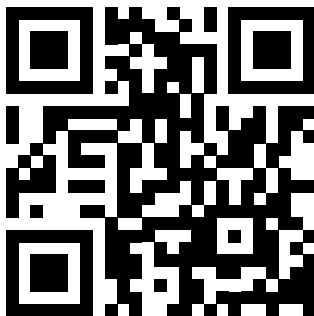

SERVIZIO POST-VENDITA
Per ulteriori informazioni sull'uso, la pulizia
e la risoluzione dei problemi, leggere il
manuale d'istruzioni.

www.nosiboo.eu
customerservice@nosiboo.com
+36 72 551 642

nosiboo^{*}®
designed to care